

DRE Integra SL3 es la máquina de anestesia ideal para el alto tráfico de pacientes en la sala de cirugías de hoy en día.

Diseñada por expertos, sus características de enfoque clínico incluyen opciones para caudalímetro personalizable, un sistema estándar de instalación al igual que un ventilador y un aparato de absorción totalmente integrados. La barra trasera compatible con Selectatec tiene espacio para dos o tres vaporizadores. Los monitores de signos vitales se venden por separado.

Características:


- Escoja que pantalla de visualización para el control de flujo es la indicada para usted:
 - » Estándar/Tubos de flujo de cascadas
 - » Tubos de flujo de cascadas con visualización de flujo electrónico: vista numérica de flujo de gas
 - » Visualización de flujo virtual (VFV): vista gráfica y numérica de tubos de flujo con bobinas de rotación virtual y tubos de flujo total tradicionales
- La barra trasera compatible con Selectatec tiene espacio para dos o tres vaporizadores
- Capacidades de Sistema de Información de Hospital (SIH) cuando se utiliza la visualización de flujo electrónico o VFV.
- Espacio conveniente de escritura para tomar notas o crear gráficas.
- Aparato de absorción de CO2 totalmente integrado y unidad de fuelle con la interfaz del ventilador
- Instalación compatible con GCX™ estándar
- Cajones de gran capacidad para facilitar el almacenamiento



Configuración Estándar:



Ventilador AV-S: Un modelo multifuncional que incluye tres modos de apoyo espontáneos avanzados y PEEP electrónico. El ventilador AV-S está diseñado para uso pediátrico al igual que para adultos e incluye monitoreo de oxígeno integrado y espirometría. Además, una integración sin esfuerzo con la máquina de anestesia y el aparato de absorción A200SP.

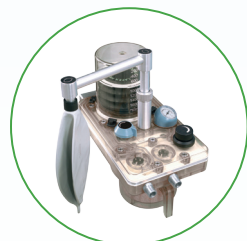

Aparato de absorción A200SP: Incluye la interfaz del ventilador que provee la habilidad de cambiar de modos desencadenada por la bolsa o el control del ventilador. A200SP cuenta con un bote de liberación rápida para una fácil extracción y limpieza. Todas las partes son autoclavables.



Vaporizador Sigma Delta: Disponible con opciones múltiples de sistema de llenado.

Especificaciones:

- Dimensiones globales: 28" (71cm) Ancho x 27.5" (70cm) Profundidad x 55" (139cm) Altura
- Altura de Superficie de Trabajo: 34" (86cm)
- Superficie de Trabajo: 15" (38cm) x 10" (25cm); sostiene 66 libras (30 kg)- distribuidos equitativamente
- Tableta para escribir: 12" (30cm) x 8.5" (22cm); 22 lbs. (10 kg) – distribuidos equitativamente
- Estante superior: 28" (71cm) x 13.5" (35cm); 66lbs. (30 kg) – distribuidos equitativamente
- Cajones: 4.5" (12cm) x 21.5" (54.5cm) x 13.5" (35cm); 22lbs. (10 kg) – distribuidos equitativamente
- Ruedas: 5" (125mm) diámetro – todas con frenos
- Peso: 275 lbs. (125 kg)

